



OWEN MUMFORD
Making a World of Difference

DEUTSCHLAND

Owen Mumford GmbH
Alte Häge 1
63762, Großostheim
T : +49 (0)6026/97750
F : +49 (0)6026/977529
E : info@owen-mumford.de

HAUPTSITZ

Owen Mumford Ltd
Brook Hill, Woodstock
Oxfordshire OX20 1TU, United Kingdom
T : +44 (0)1993 812021
F : +44 (0)1993 813466
E : info@owenmumford.co.uk

UK / IRLAND VERTRIEB & MARKETING

T : +44 (0)1608 645555
F : +44 (0)1608 646546
E : info@owenmumford.co.uk

FRANKREICH

T : +33 (0)2 32 51 88 70
F : +33 (0)2 32 21 96 95
E : contact@owenmumford-fr.com

NORDAMERIKA

T : +1 800-421-6936
F : +1 770-977-2866
E : info@owenmumfordinc.com

CHINA

T : +86 (0)21 6032 3528
F : +86 (0)21 6032 3782
E : info@owenmumford.co.uk

www.owen-mumford.de

UNSERE AKKREDITIERUNGEN:

- ISO13485 Zertifizierung
- Medizinprodukte Direktive 93/42/EEC
- CMDCAS 13485 (Kanad. Gesundheitsbehörde)
- Umwelt Management System ISO14001



NT/0100-LT/ON/LE/H/0515/GER

Zwei Screening-Funktionen in einem Griff



 OWEN MUMFORD

Neuropen®

Neuropathie Screening Gerät

Ein Grund zu lächeln



www.owen-mumford.de

Neuropen®

Neuropathie Screening Gerät

Wiederverwendbar.

Der **Neuropen®** ist so konzipiert, dass er immer wieder verwendet werden kann.

Schmerzempfinden.

Tests mit kalibriertem **Neurotip™** zur Beurteilung einer Schmerzempfindung oder Spitz/Stumpf Unterscheidung in den feinen Nervenbahnen.

Druckempfinden.

Neuropen® Monofilamente zur Beurteilung der schützenden Wahrnehmung von Berührungen und Druck in den großen Nervenbahnen.

Austauschbar.

Neuropen® Monofilamente können bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden.

Neurotips™


Neurotips™ sind sterile Einmalnadeln für neurologische Untersuchungen ohne Risiko die Haut versehentlich zu verletzen.

Kalibrierte Neurotip™ Tests – Zur Ermittlung der Schmerzempfindung oder Spitz/Stumpf Unterscheidung der feinen Nervenbahnen.

Bei Verwendung eines **Neurotip™** mit dem **Neuropen®** wird die Haut des Patienten durch eine kalibrierte Feder mit einem definierten Druck von 40 g stimuliert. So lässt sich feststellen, ob die Schmerzempfindung und/oder die Spitz-Stumpf-Unterscheidung der feinen Nervenbahnen herabgesetzt sind.

Sichtfeldprüfung

Die roten und weißen **Neurotips™** bieten Kontrast für die Prüfung des Sichtfeldes nach Unfällen.

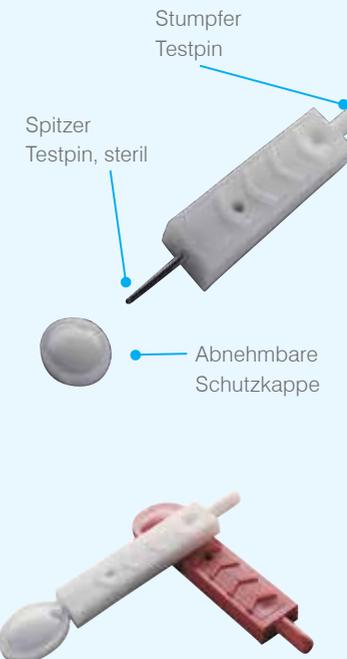

Neuropen®

MONOFILAMENTE

Der **Neuropen®** bietet die Möglichkeit das Monofilament auszutauschen ohne ein neues Gerät zu benötigen.

10g Monofilament Test – zur Beurteilung der Wahrnehmung von Berührungen.

Das 10 g Monofilament nach Semmes-Weinstein ist ein neurologisches Screening Gerät zur Untersuchung der Sensibilität in Füßen und Beinen. Der relativ steife Kunststoffaden knickt bei einem definierten Druck – üblicherweise 10 g – ab. Dieser Druck sollte bei Aufdrücken des Monofilamentes bis zu dem Punkt, an dem es sich biegt, von einem gesunden Patienten gespürt werden. Fehlt die Wahrnehmung des Druckes, besteht Verdacht auf eine Neuropathie.



So erhalten Sie den Neuropen®

Sie können alle Neuropen Produkte direkt bei Owen Mumford bestellen.

- Telefonisch +49 (0)6026 977 50
- Per Fax: +49 (0)6026 977 529
- Online: www.shop.owen-mumford.de