

# Unistik® 3

## Unistik® 3 Gentle

Calibre : 30G  
Profondeur : 1.5 mm  
Marges de volume sanguin :  
3µL – 15µL

DISPONIBLE SUR  
ORDONNANCE

Nouveau

Types de test recommandés :  
contrôle de la glycémie, HbA1c.

Domaines d'applications recommandés :  
centre de soins diabète, pédiatrie, à domicile.



Boîte de 100 : AT1022  
Boîte de 200 : AT1024

ACL : 34010 2032116 3

## Unistik® 3 Comfort

Calibre : 28G  
Profondeur : 1.8 mm  
Marges de volume sanguin :  
5µL – 30µL

DISPONIBLE SUR  
ORDONNANCE

Types de test recommandés :  
contrôle de la glycémie, HbA1c.

Domaines d'applications recommandés :  
centre de soins diabète, pédiatrie, gériatrie, à domicile.



Boîte de 100 : AT1042  
Boîte de 200 : AT1044

ACL : 34010 4407916 3

## Unistik® 3 Normal

Calibre : 23G  
Profondeur : 1.8 mm  
Marges de volume sanguin :  
30µL – 75µL

DISPONIBLE SUR  
ORDONNANCE

Types de test recommandés :  
cholestérol, contrôle de la glycémie, HbA1c.

Domaines d'applications recommandés :  
gériatrie, à domicile, centres de transfusion sanguine.



Boîte de 100 : AT1002  
Boîte de 200 : AT1004

ACL : 34010 4407891 3

## Unistik® 3 Extra

Calibre : 21G  
Profondeur : 2.0 mm  
Marges de volume sanguin :  
75µL – 125µL

Types de test recommandés :  
cholestérol, hémoglobine,  
kits de test de diagnostic.

Domaines d'applications recommandés :  
adultes à peaux très épaisses, centres de transfusion sanguine.



Boîte de 100 : AT1012  
Boîte de 200 : AT1014

## Unistik® 3 Neonatal & Laboratory

Calibre : 18G  
Profondeur : 1.8 mm  
Marges de volume sanguin :  
200µL+

Tests au talon du nouveau-né

Types de test recommandés :  
phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale,  
bilirubine, glucose, hémoglobine,  
drépanocytose et autres maladies.

Domaines d'applications recommandés :  
tests au talon des nouveaux-nés.



Laboratoire – Test au doigt

Types de test recommandés : gaz de sang, électrolyte,  
H. pylori, numération formule sanguine NFS.

Boîte de 100 : AT1052  
Boîte de 200 : AT1054

Prélèvement sanguin capillaire

Unistik® 3

 **OWEN MUMFORD**  
Making a World of Difference

### SIEGE SOCIAL VENTES ET MARKETING INTERNATIONAL

Owen Mumford Ltd  
Brook Hill, Woodstock  
Oxfordshire OX20 1TU, United Kingdom  
T : 01993 812021 F : 01993 813466  
E : info@owenmumford.co.uk

### ROYAUME-UNI ET IRLANDE VENTES ET MARKETING

Owen Mumford Ltd  
Primsdown Industrial Estate  
Worcester Road, Chipping Norton  
Oxfordshire OX7 5XP, United Kingdom  
T : 01608 645555 F : 01608 646546  
E : info@owenmumford.co.uk

### AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE LATINE

T : 800-421-6936  
F : 770-977-2866  
E : info@owenmumfordinc.com

### FRANCE

T : 02 32 51 88 70  
F : 02 32 21 96 95  
E : contact@owenmumford-fr.com

### ALLEMAGNE

T : 06026/97750  
F : 06026/977529  
E : info@owen-mumford.de

### CHINE

T : 021 6032 3528  
F : 021 6032 3782  
E : info@owenmumford.co.uk

[www.owenmumford.com](http://www.owenmumford.com)



Les utilisateurs de Smartphone  
peuvent scanner ce QR code  
pour plus d'information  
sur la gamme Unistik® 3.

### NOS ACCRÉDITATIONS INCLUENT\* :

- La certification ISO13485
- La Directive Dispositifs Médicaux 93/42/EEC
- Système de Gestion de l'Environnement ISO 14001



\*sites de production anglais.

Les produits Unistik® 3 Gentle, Unistik® 3 Comfort, Unistik® 3 Normal, Unistik® 3 Extra et Unistik® 3 Neonatal & Laboratory sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Owen Mumford et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié SGS. Ils sont destinés aux professionnels de santé dans le cadre des prélèvements sanguins capillaires. Ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de différents tests réalisés au sein des établissements de santé. Ces dispositifs sont des autopiqueurs sécurisés faciles à utiliser qui procurent un confort optimal aux patients. Lire attentivement la notice d'utilisation. Pour le bon usage de ces produits, il est recommandé de bien vérifier que le capuchon n'a pas été précédemment enlevé. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Les produits de la gamme Unistik® 3 sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie – code LPPR : 1186774

AT/1042-HCPL/CCC0314/F Photos non contractuelles. © comme e | ancalegroupe.com... 03/2014



La Technologie de la Zone de Confort  
assure un prélèvement sanguin plus confortable

## Unistik® 3

Autopiqueurs sécurisés  
à usage unique

NOUVEAU

Unistik® 3 Gentle  
30G 1.5 mm



 OWEN MUMFORD

# Unistik® 3

Autopiqueurs sécurisés à usage unique.


Des autopiqueurs sécurisés dotés d'une **Technologie Unique** : la **Zone de Confort** pour un prélèvement de sang plus confortable.

## Comfort Zone Technology®

Une série de 8 picots est disposée sur l'embase du dispositif. Dès qu'ils sont pressés sur le doigt, ils stimulent les terminaisons nerveuses. Ils envoient un puissant message de confort au cerveau – masquant la légère sensation d'inconfort provoquée par la lancette.

### La Théorie de La Porte\*

Melzack et Wall ont constaté que les stimuli dirigés vers le cerveau sont contrôlés par des portes dans la corne dorsale de la moelle épinière qui traitent et contrôlent l'information sensorielle. Lorsque des stimuli non douloureux sont transmis au cerveau, une porte s'ouvre pour permettre à ces stimuli de passer et simultanément une autre porte se ferme pour empêcher que des stimuli douloureux soient perçus.

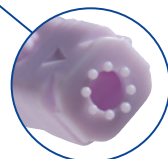


\* R Melzack, PD. Wall : « Pain mechanisms : A new theory » Science, 150 : 171-9, 1965.



## Preuve clinique

Des essais d'autopiqueurs ont montré que les dispositifs Unistik® 3 avec Technologie de la Zone de Confort réduisaient la douleur ressentie lors de la manipulation du prélèvement comparé aux dispositifs Unistik® 3 utilisés sans Technologie de la Zone de Confort.

Comparaison du score maximum de douleur Unistik® 3 avec et sans CZT

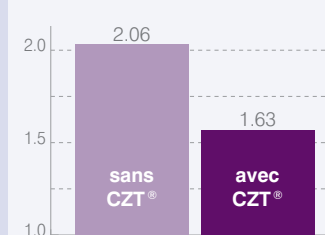

Simbec Research - Unistik® 3 résultats de l'évaluation clinique - 2007

## Un confort renforcé

Le déclencheur latéral et le pré-réglage de vitesse de la lancette favorisent **une utilisation facile** et performante aux professionnels de santé et **un confort optimal** aux patients.



## Facile à utiliser

La gamme **Unistik® 3** se distingue par une grande variété de couleurs facilitant la différenciation des modèles. Le dispositif est pré-armé avec un simple dévissage du capuchon de protection rendant l'**Unistik® 3** prêt à l'emploi.

## Sécurisé

**Unistik® 3** est un dispositif à usage unique conçu pour assurer un niveau de sécurité optimum aux professionnels de santé et aux patients.


La pointe de la lancette **Unistik® 3** est cachée avant et après usage et se rétracte automatiquement pour éviter toutes blessures par piqûre et contamination croisée.

**Unistik® 3** dispose d'une fonction de verrouillage visuel, au cas où un mauvais usage serait effectué. Le verrouillage indique clairement à l'utilisateur que le dispositif a déjà été utilisé et empêche toute réutilisation accidentelle.



# Mode d'emploi Unistik® 3


## Simple, rapide et sûr

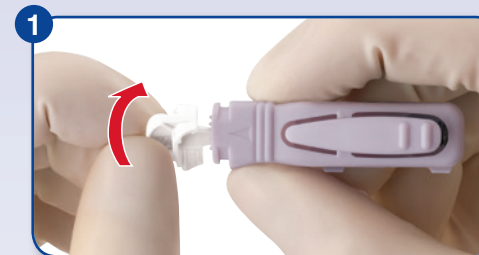

Tenez l'autopiqueur par les côtés et cassez la protection en **la tournant sans tirer**.



Pressez l'embase fermement sur l'extérieur du doigt et appuyez sur le déclencheur.

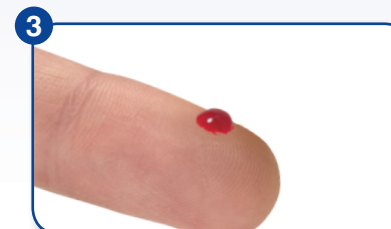

Massez le site de ponction en prenant soin de ne pas presser trop fort.



Éliminez l'autopiqueur dans un collecteur de déchets adapté.